


Cartas Moldes

Contribuindo com a beleza do sorriso

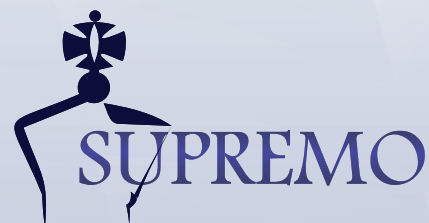

NewTRI

Platinum TRI

NewForm










Dent Clean



www.imodonto.com

 **IMODONTO**

ANTERIORES SUPERIORES

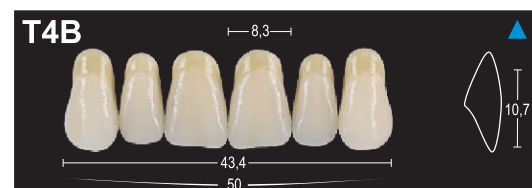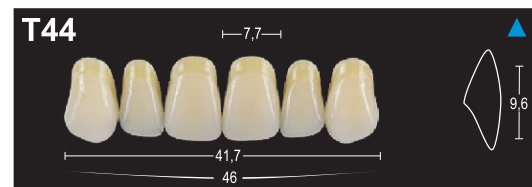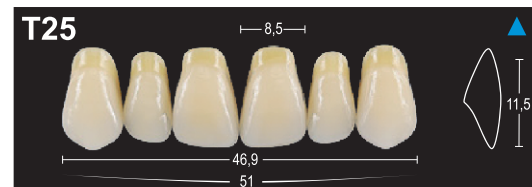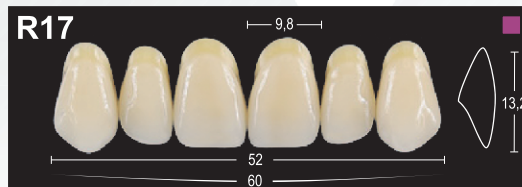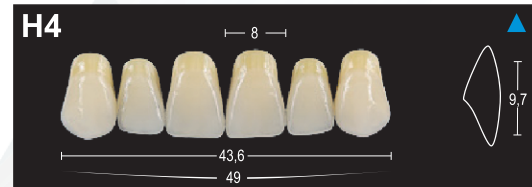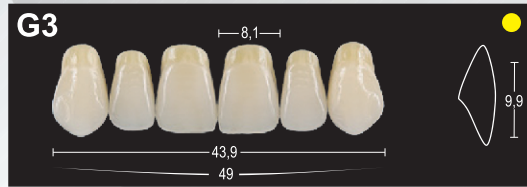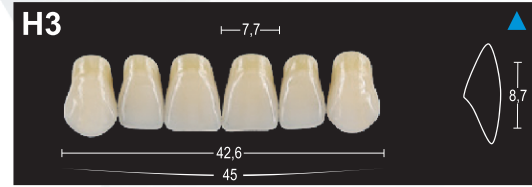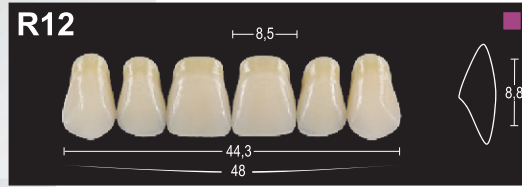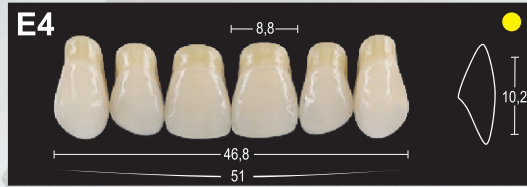

FORMATO DO DENTE
DE ACORDO COM O
BIOTIPO.



DENTES ACRÍLICOS PARA PRÓTESES DENTÁRIAS

Seguir os procedimentos usuais para escolha, montagem, articulação, acrilização, controle microbiológico e manutenção da prótese, bem como para proteção individual.

Para melhor adesão dos dentes ao polimento da base da prótese, tirar o brilho da base do dente com uma ferramenta abrasiva. Após isolamento da mufla e antes da aplicação da resina, limpar a base dos dentes com monômero de metilmetacrilato.

Recomendações ao paciente: Para aumentar a durabilidade dos dentes é recomendada uma higienização diária sem uso de substâncias agressivas como ácidos ou álcalis.

Composição: Polimetilmetacrilato - Dimetacrilato - Fluorescente - Pigmentos Biocompatíveis..

Armazenagem: Conservar ao abrigo de luz e calor.

Embalagem: 8 placas anteriores ou 5 placas posteriores.

ESCALA DE CORES
Referencial Vita®

A1 A2 A3 A3,5 A4 B2 C2

ANTERIORES INFERIORES










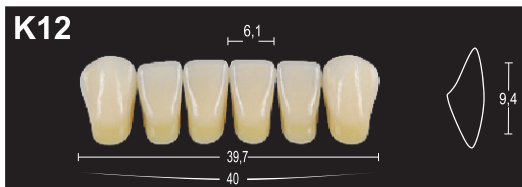


TABELA DE ARTICULAÇÃO

Anterior		Posterior
E 2	L 5	M 2
E 3	K 6	M 4
E 4	L 5	M 4 - M 6
F 4	K 10 - L 10	M 4 - M 6
G 3	K 6	M 4
H 3	L 3	M 3
H 4	L 3	M 5
L 2	K 6	M 4
L 4	K 12 - K 10	M 4 - M 6
O 31	L 5	M 3
O 32	L 3	M 5
O 36	L 7	M 4
R 11	L 1	M 3
R 12	L 5	M 3
R 13	L 5	M 3
R 14	L 7	M 4 - M 6
R 17	K 10	M 6
R 66	L 5	M 5
T 21	L 3	M 3
T 22	L 3	M 3 - M 5
T 25	L 10	M 4
T 44	L 3	M 3 - M 5
T 4B	L 5	M 2

POSTERIORES

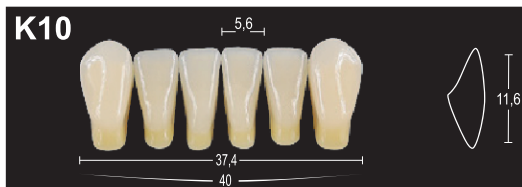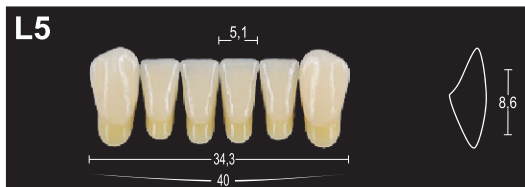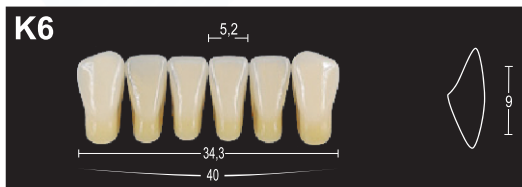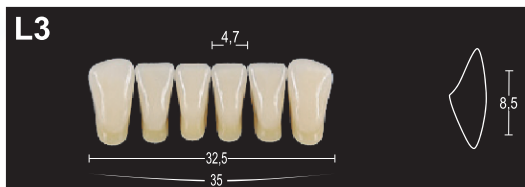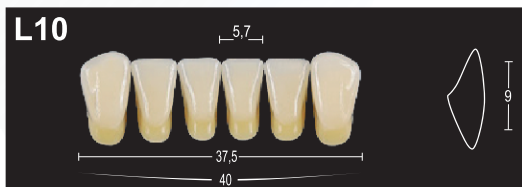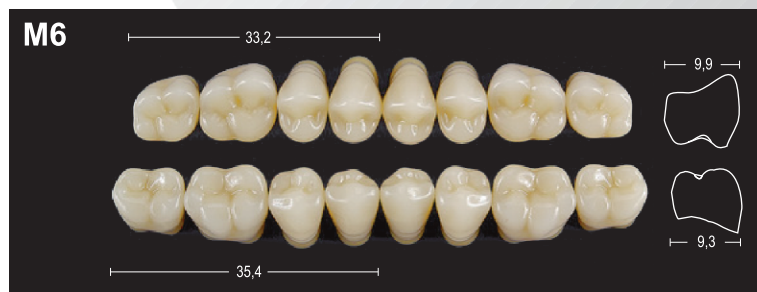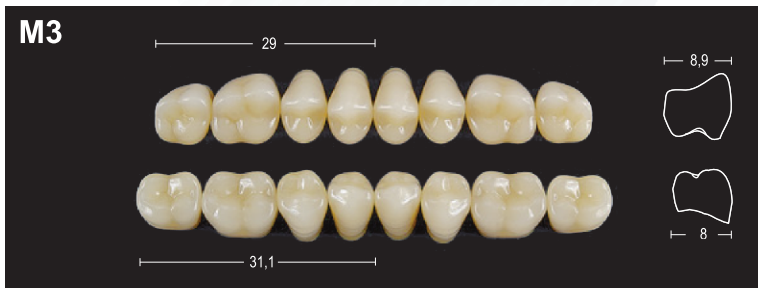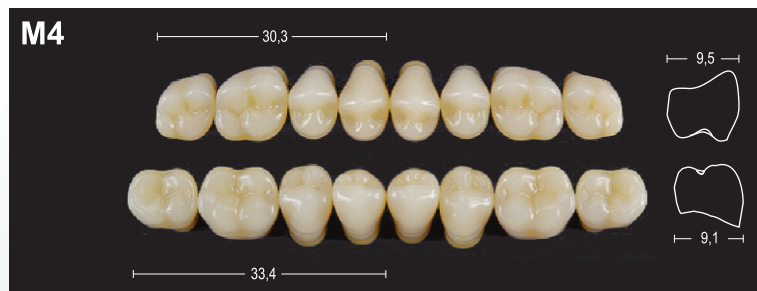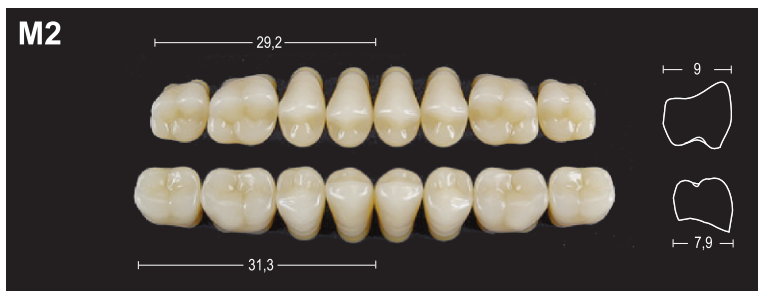

BENEFÍCIOS

- ✓ Aspecto natural;
- ✓ Simetria e detalhes;
- ✓ Mamelos evidenciados;
- ✓ Ótimo ajuste anatômico;
- ✓ Oclusão;
- ✓ Alta resistência mecânica, química e à abrasão;
- ✓ Excelente aderência a base;
- ✓ Mantém as cores naturais;
- ✓ Não agride a mucosa.



1-Composição:

- Polimetacrilato;
- Dimetacrilato de Etileno Glicol;
- Fluorescente;
- Pigmentos Biocompatíveis.

2-Aplicações:

- Prótese parcial ou total;
- Prótese fixa ou removível.

3-Recomendações:

- Conservar ao abrigo de luz e calor;
- Siga os procedimentos usuais para escolha, montagem, articulação, acrilização, controle microbiológico e manutenção da prótese, bem como para proteção individual;
- Para melhor adesão dos dentes à base da prótese, tirar o brilho da base do dente com ferramenta abrasiva. Antes da aplicação da resina, limpar a base dos dentes com monômero de metilmetacrilato;
- É recomendado ao paciente a higienização diária da prótese sem o uso de substâncias agressivas como ácidos ou álcalis.

CONHEÇA NOSSA LINHA COMPLETA!

- Resinas acrílicas;
- Resinas e ceras para caracterização;
- Gessos Especial Tipo IV e Tipo III;
- Isolante para resinas e gesso X gesso;
- Duplicador para PPR;
- Revestimento a base de quartzo;
- Binder 28% e 40%;
- Silicone para muralha;
- Ceras 7, 9, Utilidade, Articulação, Periférica, Orto, Rolete e Escultura;
- Vaselina Sólida;
- Removedor de ceras;
- Pedra-pômes;
- Pasta para polimento em acrílico e metal;
- Opacificador.



Nossas vantagens

- ✓ Aspecto natural;
- ✓ Simetria e detalhes;
- ✓ Mamelos evidenciados;
- ✓ Ótimo ajuste anatômico;
- ✓ Oclusão;
- ✓ Fluorescência natural;
- ✓ Alta resistência mecânica, química e à abrasão;
- ✓ Excelente aderência a base;
- ✓ Mantém as cores naturais;
- ✓ Não agride a mucosa.

Contato



Fone: (19) **3565-2716**

(19) **3561-5292**

WhatsApp: (19) **99735-0348**

 **IMODONTO**

■ Imodonto Indústria de Materiais Odontológicos
Comércio, Importação e Exportação Eireli - ME

Rua Urbano Rabello, 572 - Vila Nova - Pirassununga - São Paulo - Brasil
CEP: 13.632-302 - CNPJ(MF): 21.738.250/0001-01 - IE: 536.068.133.113

www.imodonto.com - sac@imodonto.com

Fone: (19) 3561-5292 – (19) 3565-2716

Descubra muito mais em nossa

Fanpage

@imodonto